



Global Cardiac
Services

900 823 524
www.cardiac.es
info@cardiac.es

SAM^{XT} Extremity Tourniquet TORNICUETE PARA EXTREMIDADES FIJACIÓN MEDIANTE CLIC-GIRAR



PROBADO PARA SOBREVIVIR

Diseñado para una rápida aplicación, el innovador diseño de SAM XT requiere menos vueltas del molinete y permite una formación más rápida y fácil y un uso intuitivo. Excede las pautas de durabilidad estipuladas por la norma MIL-STD 810G



TECNOLOGÍA UTILIZADA


HEBILLA TRUFORCE

La holgura es la principal causa de que falle la aplicación de un torniquete. La tecnología de la hebilla TRUFORCE™ se autobloquea para eliminar prácticamente toda la holgura del torniquete al incorporar un innovador control de la fuerza, activando las clavijas de bloqueo.



CREADO PARA SALVAR VIDAS

- 1 BANDA PARA CONTROLAR LA HORA**
Su sistema de velcro resistente a las condiciones meteorológicas mantiene su funcionalidad cuando está totalmente sumergido, proporcionando la máxima seguridad con la climatología más adversa. El material exterior está optimizado para la visión nocturna.
- 2 GANCHO EN C DEL MOLINETE**
Fija la posición de la varilla metálica del molinete gracias a su intuitivo diseño en ángulo, por lo que el molinete se puede fijar en su sitio de forma más fácil y eficiente.
- 3 PLACA TRUFLEX™**
Fabricada en nailon de alta durabilidad, distribuye la fuerza como presión dirigida para ofrecer la máxima resistencia y flexibilidad, pudiéndose doblar en extremidades más pequeñas sin que se rompa.
- 4 HEBILLA TRUFORCE™**
La innovadora tecnología de autobloqueo activa las clavijas de bloqueo, eliminando la holgura habitual en otras aplicaciones de torniquete.
- 5 VARILLA METÁLICA DEL MOLINETE**
Mecanizada a partir de barras extruidas de auténtico aluminio 6061-T6 en lingotes, resistente y ligero para una fiabilidad constante en comparación con los compuestos de plástico.
- 6 CORREA DE PRECISIÓN**
Los torniquetes con Velcro pueden fallar si están mojados o sucios. La correa de precisión resistente a las inclemencias del tiempo está fabricada en tejido de nailon de una sola capa. Tiene orificios intercalados que se enganchan en la hebilla TRUFORCE™ creando un sistema de seguridad primario uniforme y eficiente. El sistema de Velcro® secundario fija la correa restante para proporcionar una mayor estabilidad y seguridad.
- 7 LENGÜETA DE PRECISIÓN**
El diseño intuitivo permite una aplicación más rápida y más fácil del torniquete. El material está optimizado para la visión nocturna.

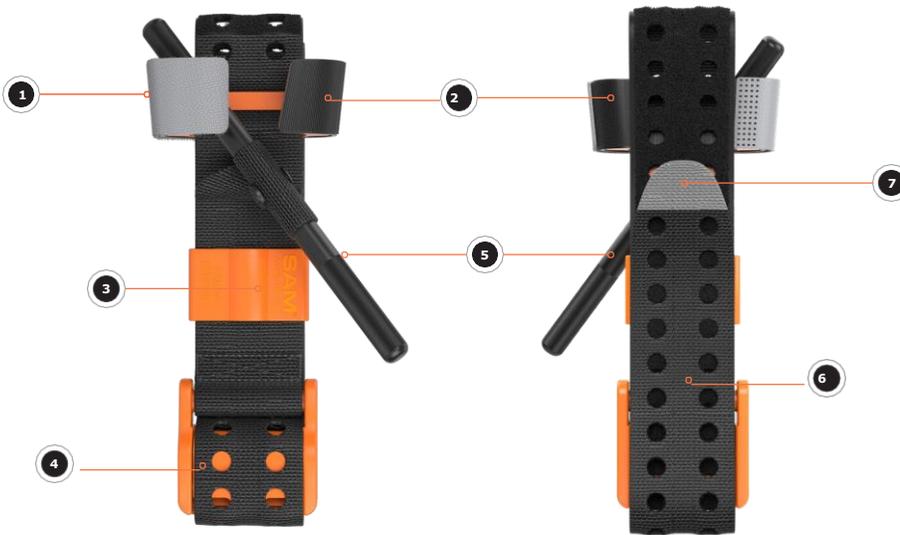

MODELOS



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TAMAÑO Y PESO DEL ENVASE*

Largo: 6.3 cm (2.5 in)
Anchura: 3.8 cm (1.5 in)
Altura: 18.4 cm (7.25 in)
Peso: 108 g (3.8 oz)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

La tecnología de la hebilla TRUFORCE™ se autobloquea para engranar los orificios de la correa dentro del rango de la circunferencia: 13.9 cm - 88.9 cm (5.5 in - 35 in)

MODELOS DISPONIBLES**

Táctica Negro (XT600-BK-EN) /
NSN#: 6515-01-670-2240
HI-VIZ Naranja (XT600-OR-EN)
HI-VIZ Azul (XT600-BL-EN)

VENTAS A NIVEL MUNDIAL

Gratuito (EE. UU.): 800.818.4726
Local (EE. UU.): 503.639.5474
Fax (EE. UU.): 503.639.5425
sammedical.com

			<ul style="list-style-type: none"> XT600-BK-EN XT600-OR-EN XT600-BL-EN
Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, La Haya (Países Bajos)	SAM Medical Products® 12200 SW Tualatin Rd., Ste 200 Tualatin, OR 97062 USA		

* El tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación.

** Pendiente de patente.

SAM® es una marca comercial registrada en EE. UU. y otros países.

©2019 SAM Medical Products. Reservados todos los derechos.

SXT-SS-ES-04